



SU GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA

Para la Philips Respironics DreamStation®



Utilice este enlace QR a nuestra página de apnea del sueño para obtener más información.



INICIO.

Consulte su guía de usuario para la terapia del sueño de Apria para obtener más detalles.

1

Abra la caja y desempaque su máquina de PAP, cámara humidificadora, tubo, máscara, cable de alimentación y suministros.


Consulte la página 4



2

Conecte el cable de alimentación a la máquina de PAP.


Consulte la página 4

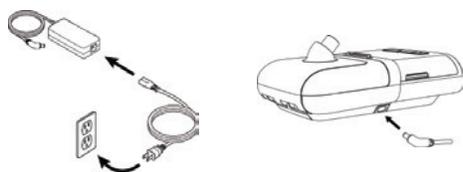

3

Conecte el tubo a la máquina de PAP.

Consulte la página 4

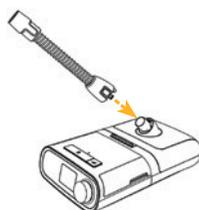


4

Llene el humidificador con agua destilada e inserte en la máquina de PAP.

(Se recomienda que utilice agua destilada. Sin embargo, si no tiene agua destilada a la mano, con el fin de que inicie su terapia hoy, se puede utilizar agua embotellada como sustituto del agua destilada de manera temporal.)

Consulte la página 4

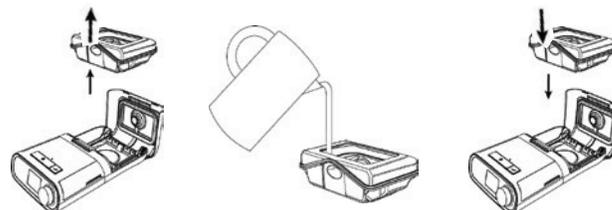

5

Coloque la máquina de PAP en una mesa al lado de su cama.

(La altura de la mesa debe ser inferior a la de su cabeza.)

Consulte la página 4

6

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de la pared.

Consulte la página 4

CONTINÚA AL REVERSO

7

Ajuste su máscara. Si su médico recetó una máscara y tamaño específicos, siga las instrucciones de ajuste proporcionadas por el fabricante. Si recibió una máscara con varios cojines, siga estas instrucciones:

Ya hay un cojín de máscara fijado a la estructura de su máscara. Este tamaño encaja para la mayoría de los pacientes. Una vez que comience su terapia, si su máscara tiene una fuga o se siente incómodo, retire el cojín actual y reemplace con un cojín de otro tamaño. Si su medida se encuentra entre dos tamaños, es mejor utilizar el cojín más grande. Utilice la plantilla de ajuste (para la máscara nasal y la máscara que cubre todo el rostro) y/o las instrucciones del fabricante que se incluyen con su máscara para obtener ayuda.

Consulte las páginas 5-8



Máscara nasal

Máscara de almohadilla nasal

Máscara que cubre todo el rostro

8

Póngase la máscara.

Consulte las páginas 5-8

9

Conecte el tubo a la máquina de PAP.


Consulte las páginas 9-10

10

Conecte el tubo a la máscara.

(Si utiliza el oxígeno recetado, consulte las páginas 9 y 10 de su GUÍA DE USUARIO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA.)

Consulte la página 11

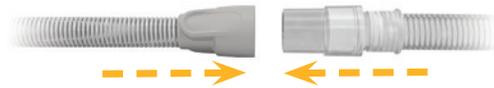

11

Acuéstese y respire profundamente cuatro veces.

La máquina debe encenderse automáticamente. Si no oye que la máquina se enciende, presione el botón de encendido/apagado. Relájese y comience a respirar lentamente por la nariz.

Consulte la página 11

12

Revise que no haya fugas de aire.

Las fugas pequeñas son aceptables. Si se producen fugas grandes, consulte su GUÍA DE USUARIO PARA LA TERAPIA DEL SUEÑO DE APRIA.

Consulte las páginas 11-12

13

Su configuración está completa.

Ahora puede comenzar su terapia de PAP.

Consulte la página 13

14

Asegúrese de seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento que se incluyen y revise el cronograma recomendado de repuestos de suministros.

Consulte las páginas 14-20

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar su dispositivo y comenzar su tratamiento, llame a un miembro del equipo Sleep Expert de Apria.



Marque el número que aparece a continuación y seleccione la opción 4.

877.265.2426

Lunes a viernes: de 8 a. m. a 10 p. m., hora del este

Sábados y domingos: de 11 a. m. a 7:30 p. m., hora del este